


# waterpik®

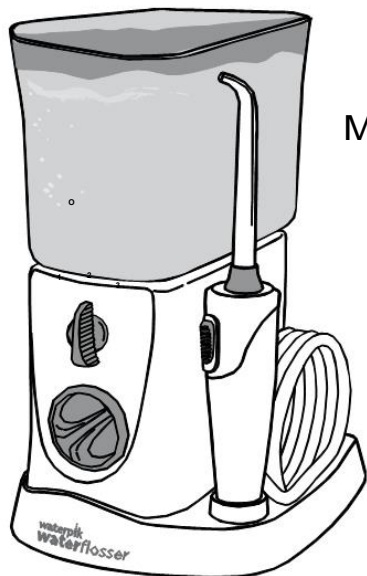

„Waterpik®“ burnos irigatorius  
Modeliai WP-250/260/270/300/305

[www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt)

## TURINYS

Svarbios atsargumo priemonės	3
Gaminio aprašymas	5
Nuo ko pradėti	7
Jūsų Waterpik® burnos irigatoriaus valymas ir trikčių šalinimas	9
Ribota dvejų metų garantija	10

## SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus, ypač vaikams esant šalia, visada reikėtų imtis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant:

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS.**

### PAVOJUS:

Siekiant sumažinti elektros srovės pavojų:

- Po prietaiso naudojimo, nepamirškite jo išjungti.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Nedėkite / nemeskite į vandenį ar kitą skystį.
- Nenaudokite maudydamiesi vonioje.
- Nedėkite / nelaikykite gaminio ten, kur jis galėtų įkristi ar būtų įmestas į vonią ar kriauklę.
- Neimkite gaminio, kuris įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite kištuką.
- Prieš naudodami pirmą kartą ir po to reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.

### ĮSPĖJIMAS:


Siekiant sumažinti nudegimų, elektros srovės, gaisro ar sužalojimo riziką:





- Nejunkite šio prietaiso į tokią įtampos sistemą, kuri skiriasi nuo ant prietaiso ar įkroviklio nurodytos įtampos sistemos.
- Nenaudokite šio gaminio, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei neveikia tinkamai, jei buvo išmestas ar pažeistas, ar įmestas į vandenį. Susisiekite su Water Pik, Inc. vietos atstovu UAB „Vilniaus medicinos servisas“ [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt)
- Nenukreipkite vandens po liežuvių, į ausį, nosį ar kitas jautrias vietas. Šis gaminyje geba sudaryti tokius slėgius, kurie gali rimtai pažeisti šias sritis.
- Nenukreipkite vandens į nosį ar ausį. Vandenyje iš čiaupo ar nechloruotame vandenyje gali būti pavojingų gyvybei amebų *Naegleria fowleri*.
- Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, arba kaip rekomenduoja jūsų dantų priežiūros specialistas.
- Naudokite tik Water Pik, Inc. rekomenduojamus antgalius ir priedus.

- Nedėkite / nekiškite jokių svetimkūnių į gaminio angą.
  - Laikykite maitinimo laidą toliau nuo kaitinamų paviršių.
    - Nenaudokite šio gaminio lauke ir nesinaudokite juo ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) gaminiai arba kur tiekiamas deguonis.
    - Su šiuo gaminiu nenaudokite jodo, baliklio ar vandenyje netirpių koncentruotų eterinių aliejų. Jų naudojimas gali pabloginti gaminio veikimą ir sutrumpinti gaminio naudojimo laiką.
  - Rezervuarą pildykite tik vandeniu ar kitu dantų priežiūros specialisto rekomenduojamu tirpalu.
  - Prieš naudodami šį gaminį, pašalinkite burnos papuošalus.
  - Nenaudokite, jei ant liežuvio ar burnoje yra atvirų žaizdų.
  - Jei jūsų gydytojas jums rekomendavo parengtinį gydymą antibiotikais prieš dantų priežiūros procedūras, prieš naudodami šį prietaisą ar bet kokią kitą burnos higienos priemonę, turėtumėte pasikonsultuoti su savo odontologu.
  - Būtina griežta priežiūra, jeigu prietaisu naudojasi vaikai ar neįgalieji, ar jiems esant prietaisu naudojasi kitas asmuo.
- Jeigu Pik Pocket™ atngalis (nėra įtrauktas į visus modelius) Dėl bet kokios priežasties netinka prietaiso ašiai, tai pakeiskite seną atngalį ir ašį nauju Pik Pocket™ atngaliu.
  - Nenaudokite gaminio ilgiau nei 5 minutes dviejų valandų laikotarpyje.
  - Būtina prižiūrėti vaikus, kad šie nežaistų su prietaisu.
  - Šis gaminytis turi poliarizuotą kištuką (viena geležtė yra platesnė už kitą). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šis kištukas į elektros lizdą telpa tik kišamas viena puse. Jei kištukas netelpa į elektros lizdą, apverksite jį ir pabandykite dar kartą. Jei jis vis tiek netelpa, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris kištuką pakeis. Nebandykite patys keisti ar taisyti laido ir jo kištuko.
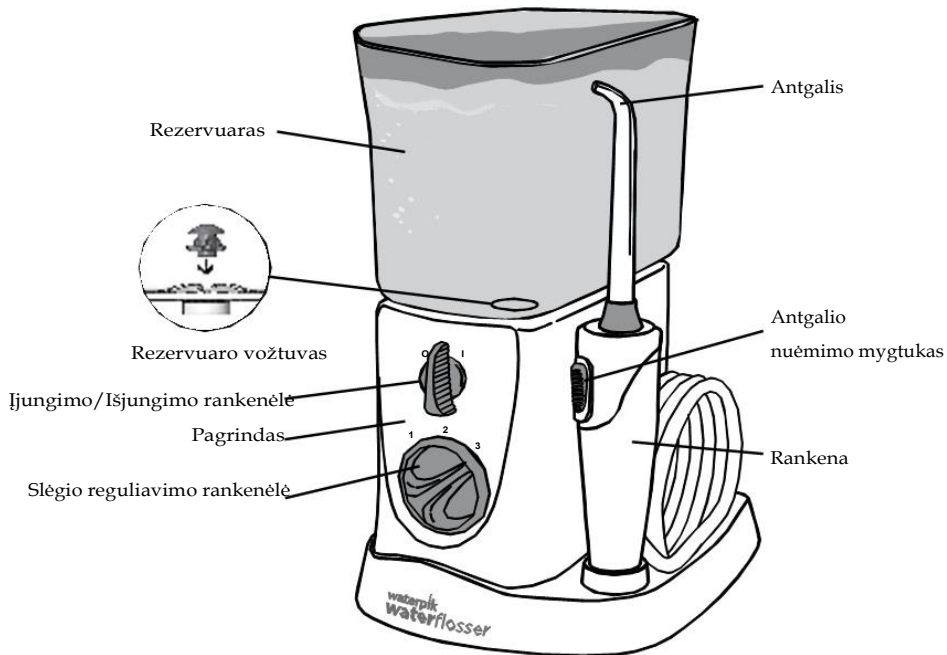
#### ISSAUGOKITE INSTRUKCIJAS.

## PRODUKTO APRAŠYMAS



Keisti kas 3 mėnesius	
Ortodontinis antgalis 	LABIAUSIAI TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Kabėms <input checked="" type="checkbox"/> Bendram naudojimui
„Pik Pocket™“ antgalis 	LABIAUSIAI TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Periodontinėms kišenėms <input checked="" type="checkbox"/> Išsišakojimams
„Plaque Seeker®“ antgalis 	LABIAUSIAI TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Implantams <input checked="" type="checkbox"/> Tiltams <input checked="" type="checkbox"/> Karūnelėms <input checked="" type="checkbox"/> Bendram naudojimui
Dantų šepetėlio antgalis 	LABIAUSIAI TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Bendram naudojimui

Keisti kas 6 mėnesius	
Klasikinis purkštuko antgalis 	LABIAUSIAI TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Bendram naudojimui
Liežuvio valiklis 	LABIAUSIAI TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Gaivesniam kvapui

**PASTABA:** Antgaliai neįtraukti į modelių komplektą.

Keitimui reikalingus antgalius/prietaisus galima įsigyti tiesiogiai iš [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt) arba telefonu +37062026601. Norėdami gauti išsamios informacijos apie antgalius, kitus priedus ir gaminio naudojimą, apsilankykite mūsų tinklalapyje [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt).

## Gaminio įjungimas

Prijunkite laidą į elektros lizdą. Jei lizdas yra valdomas sieniniu jungikliu, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas.

## Paruošimas ir naudojimas

Tinkamas naudojimo instrukcijas rasite Darbo pradžios vadove.

## Pabaigus naudoti

Išjunkite prietaisą. Išpilkite rezervuare likusį skystį. Atjunkite gaminį.

## ANTGALIO NAUDOJIMAS

### Pik Pocket™ antgalis

Pik Pocket™ antgalis yra specialiai skirtas vandens ar antibakterinių tirpalų puškimui giliai į dantų kišenes.

Norėdami naudoti Pik Pocket® antgalį,

nustatykite žemiausią slėgį.

Dėkite minkštą antgalį prie danties 45 laipsnių kampu ir švelniai kiškite antgalį po dantų linija, į kišenę.



Įjunkite įrenginį ir vedžiokite jį palei dantų liniją.


### Liežuvio valymo antgalis

Norėdami naudoti liežuvio valiklio antgalį, nustatykite žemiausią slėgį, laikykite antgalį liežuvio centre / viduryje, pusiau užpakalinėje dalyje, ir įjunkite irigatorių. Stumkite pirmyn lengvai paspausdami. Didinkite spaudimą pagal savo poreikius.



### Ortodontinis antgalis

Norėdami naudoti ortodontinį antgalį, švelniai slinkite antgalį palei dantų liniją trumpam sustodami, kad švelniai pavalytumėte vietą tarp dantų ir breketų prieš pereidami prie kito danties.

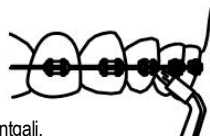

### Dantų šepetėlio antgalis

Ikiškite dantų šepetėlio antgalį į burną taip, kad



šepetėlio galvutė būtų ant danties, ties dantenuų linija. Dantų šepetėlio antgalį galima naudoti su arba be dantų pastos. Įjunkite irigatorių, kad vanduo pradėtų tekėti per antgalį. Naudodami nedidelį slėgį (šereliai neturėtų lenktis), masažuokite trumpais judesiais pirmyn-atgal taip, kaip darytumėte įprastu dantų šepetėliu.

### Plaque Seeker® antgalis

Norėdami naudoti Plaque Seeker® antgalį, laikykite jį netoli danties taip, kad šereliai švelniai liestų dantį. Švelniai slinkite antgalį palei dantenuų liniją trumpam sustodami tarp dantų, kad švelniai išvalytumėte ir leistumėte vandeniui tekėti tarp dantų.



### Burnos skalavimo ir kitų skysčių naudojimas

Savo Waterpik® irigatorių galite naudoti burnos skalavimo ir kitų antibakterinių tirpalų purškimui. Panaudoję specialųjį skystį, išplaukite prietaisą, kad užkirstumėte kelią užsikimšimui, dalinai pripildydami rezervuarą šiltu vandeniu ir paleisdami įrenginį, kai šio antgalis nukreiptas į kriauklę, kol rezervuaras ištuštės.





## VALYMAS IR GEDIMŲ NUSTATYMAS

### Valymas

Prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Kai reikia, gaminį valykite naudodami minkštą audinį ir švelnų valiklį.

Vandens rezervuaras lengvai nuimamas, kad būtų galima lengvai išvalyti, taip pat saugu jį plauti viršutiniame indaplovės stalčiuje.

**PASTABA:** Nuimkite rezervuaro vožtuvą prieš dėdami rezervuarą į indaplovę.



Nuimkite



Pakeiskite

### Kietųjų vandens nuosėdų šalinimas

Į pilną rezervuarą šilto vandens įpilkite 2 valgomuosius šaukštus baltojo acto. Maksimaliai nustatykite slėgio reguliavimo rankenėlę ir nukreipkite rankeną ir antgalį į kriauklę. Įjunkite įrenginį ir palikite jį veikti tol, kol rezervuaras ištuštės. Išplaukite dar kartą pripildę rezervuarą švaraus šilto vandens.

### Nutekėjimas

Jei nutekėjimas prasideda dėl pažeistos žamelės, pakeitimui skirtas žameles ir rankenėles galima įsigyti [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt) arba susisiekus su „Water Pik Inc.“ atstovu UAB „Vilniaus medicinos servisas“ užsisakant savarankiško remonto rinkinį. Jei nutekėjimas yra iš rezervuaro, įsitikinkite, kad vožtuvas yra pakeltas dešinėje arba susisiekite su UAB „Vilniaus medicinos servisas“ vožtuvo pakeitimo.



### Aptarnavimas

Waterpik® irigatoriai yra elektriniai prietaisai, kuriems netaikomas aptarnavimo paslaugų teikimas ir pastovus aptarnavimas. Visas dalis ir priedus rasite [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt). Taip pat galite paskambinti mūsų telefonu +37062026601.

Susirašinėjime nurodykite serijos ir modelio numerius. Šie numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje.

## RIBOTA DVEJŲ METŲ GARANTIJA

Water Pik, Inc. garantuoja naujiems šio gaminio vartotojams, kad medžiagos yra be defektų ir atsako už gaminio kokybę 2 metus nuo įsigijimo datos. Nusiskundimo atveju bus prašoma, kad pirkėjas pateiktų antspaudootą garantinę knygelę kaip įsigijimo datos įrodymą ir, jei reikės, visą gaminį, kad įrodytų garantinio aptarnavimo poreikį. Water Pik, Inc., savo nuožiūra, pakeis bet kurią gaminio detalę, kuri, jos nuomone, yra sugedusi, su sąlyga, kad po įsigijimo gaminiu buvo tinkamai elgiamasi, kad jis buvo tinkamai naudojamas pagal instrukcijas ir tik su Water Pik, Inc. patvirtintais priedais bei detalėmis.

Už instaliavimą atsakingas yra pirkėjas, garantija šio punkto neapima. Į šią ribotą garantiją neįeina priedai ar naudojamos detalės, tokios kaip antgaliai ir t.t.

Ši garantija suteikia jums specifines teises. Galite turėti ir kitų teisių, kurios skiriasi, priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos įstatymų.

