


**waterpik**<sup>®</sup>  
treat yourself better™

# **Waterpik® Ultra Dental Water Jet**

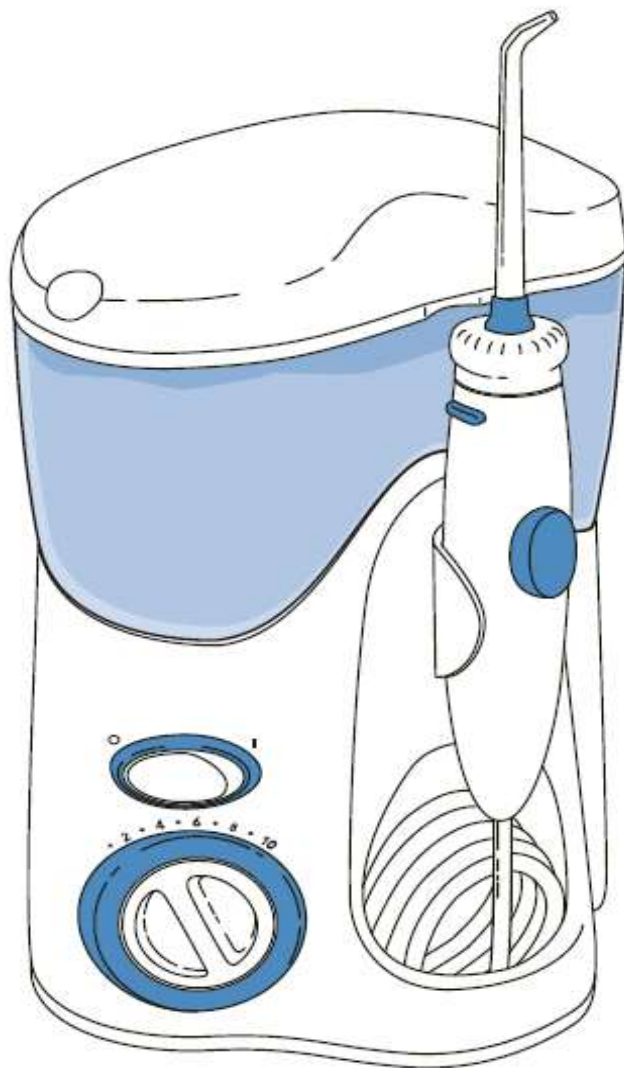

## SVEIKINIMAS

Sveikinimai! Pasirinkdami *Waterpik® Ultra Dental Water Jet* dabar Jūs einate teisinga linkme, kad palaikytumėte sveikesnes dantenas ir sveikesnę šypseną!

Su klinikiškai išbandytu vandens spaudimo ir pulsavimo deriniu, *Waterpik® Ultra Dental Water Jet* pašalina giliai tarp dantų ir už dantenų esančias žalingas bakterijas - kurių vien tik dantų šepetėliu nepasieksite.

Esame įsitikine, kad nesigailėsite ir būsite patenkinti įsigiję naująjį *Waterpik® Ultra Dental Water Jet*. Dėkojame, kad renkatės *Waterpik® Ultra Dental Water Jet*.

### Tradicinė Burnos Priežiūra



Įprastas dantų valymas negali lengvai pasiekti paslėptų maisto likučių ir žalingų bakterijų.

Dantų siūlas apribojo prieigą žemiau



dantenų linijos.

### Burnos Priežiūra Su **Waterpik® Ultra Dental Water Jet**



*Waterpik® Ultra Dental Water Jet* pašalina giliai tarp dantų esančius maisto likučius ir žalingas bakterijas.

## **TURINYS**

<b>SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS.....</b>	<b>2</b>
<b>PRIETAISO APRAŠYMAS.....</b>	<b>6</b>
<b>PASIRUOŠIMAS.....</b>	<b>8</b>
<b>BURNOS IRIGATORIAUS PRIEŽIŪRA.....</b>	<b>13</b>
<b>GEDIMŲ TAISYMO VADOVAS.....</b>	<b>13</b>

## **SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS**

### **SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Naudodamiesi elektros prietaisais, ypač tuomet, kai dalyvauja vaikai, visada turėtumėte laikytis sekančių pagrindinių atsargumo priemonių.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ.

#### **PAVOJUS:**

**Nelaimingų atsitikimų skaičiui naudojant elektros srovę sumažinimui:**

- Panaudojus prietaisą, visada jį išjunkite.
- Nelieskite prietaiso jungties šlapiomis rankomis.
- Nestatykite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi į vonią, dušo kabiną ar praustuvą.
- Nesinaudokite prietaisu maudydamiesi.
- Neįmerkite į vandenį ar kitą skystį.
- Nebandykite ištraukti prietaiso, kuris įkrito į bet kurios rūšies skystį. Ištraukite kištuką iš tinklo nedelsiant.
- Tikrinkite maitinimo šaltinio laidą dėl galimų sutrikimų prieš pirmą prietaiso naudojimą ir per visą jo tarnavimo laiką.

#### **ISPĖJIMAS:**

**Sumažinti nudegimų, elektros šoko, gaisrų, rimto sužalojimo ar pakenkimo audiniui pavojų:**


- Nenaudokite šio produkto, jei jo laidas ar jungtis yra sugadinti, jei jis tinkamai neveikia, jei jis buvo numestas ar sugadintas, ar įmerktas į kokį nors skystį. Gražinkite produktą į įgaliotą paslaugų centrą ar Water Pik, Inc.
- Atidžiai mokykite ir prižiūrėkite vaikus ir asmenis su tam tikrais poreikiais, norinčius deramai naudotis šiuo prietaisu.
- Nekreipkite vandens po liežuviumi, į ausį, nosį ar kitas jautrias vietas. Šis prietaisas gali išgauti tokį spaudimą, kuris gali padaryti rimtą žalą šiose kūno vietose. Žr. “naudojimo instrukcijos” taisyklingam naudojimui.
- Naudokite šį prietaisą tik taip kaip nustatyta šiose instrukcijose ar kaip rekomendavo jūsų dantų srities specialistas.
- Šis produktas yra suprojektuotas taip, kad būtų naudojamas po 5 minutes vieno naudojimo metu. Jei prietaisą naudoja daugiau nei vienas asmuo, leiskite prietaisui pailsėti maždaug 5 minutes po kiekvieno naudojimo.
- Tikrai naudokite priedus, kuriuos sudaro standartiniai antgaliai, Pik Pocket® antgaliai, liežuvio valiklis ir ortodontiniai antgaliai, kuriuos rekomenduoja Water Pik, Inc.
- Nenuimkite Pik Pocket® lankstaus antgalio nuo švaraus stiebelio. Jei jie dėl kokios nors priežasties atsiskiria, išmeskite abu, ir antgalį, ir stiebelį ir pakeiskite nauju Pik Pocket® antgaliu.
- Vandens rezervuarą pripildykite tik vandeniu ar kitu rekomenduotu tirpalu.

## **SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS**

- Elektros laidą laikykite kuo toliau nuo kaistančių paviršių.
- Nesinaudokite prietaisu ten, kur yra naudojami deguonies ar aerozolio purkštuvai.
- Prietaisas skirtas tik naudojimui namų sąlygomis. Nenaudokite jo išėję iš namų, lauke.
- Nesinaudokite prietaisu, jei tuo metu segite bet kokius burnos papuošalus. Visada nusiimkite juos prieš naudojimą.
- Nesinaudokite prietaisu ir tuomet, jei ant liežuvio turite atvirų žaizdų.
- Jei jūsų gydytojas ar kardiologas patarė jums gerti antibiotinius vaistus prieš kiekvieną dantų procedūrą, tuomet prieš pradėdami naudotis šiuo burnos irigatoriumi ar bet koku kitu prietaisu ar įrankiu burnos higienai palaikyti, jūs turite pasikonsultuoti su savo odontologu.

**LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ**


## PRIETAISO APRAŠYMAS

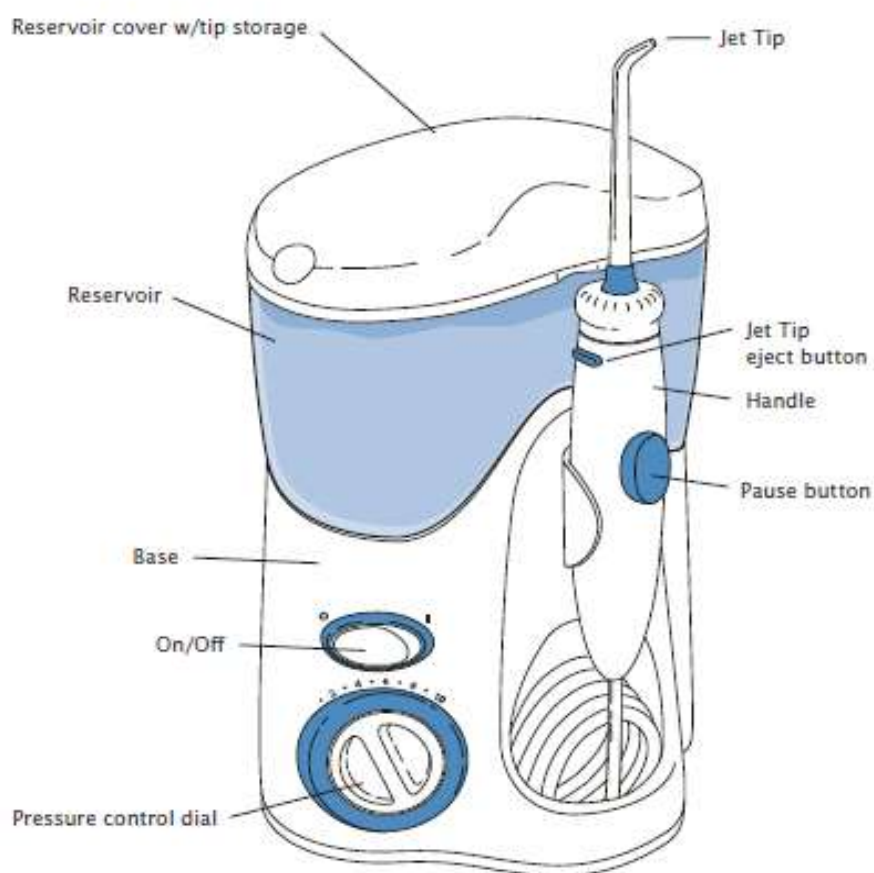


Prietaisą sudaro:

- Rezervuro dangtis/ vieta antgaliams laikyti
- Antgalis
- Rezervuaras
- Antgalio išėmimo mygtukas
- Rankena
- Sustabdymo mygtukas
- Slėgio valdymo rankenėlė
- Įjungimo/Išjungimo mygtukas
- Pagrindas

## PRIETAISO APRAŠYMAS

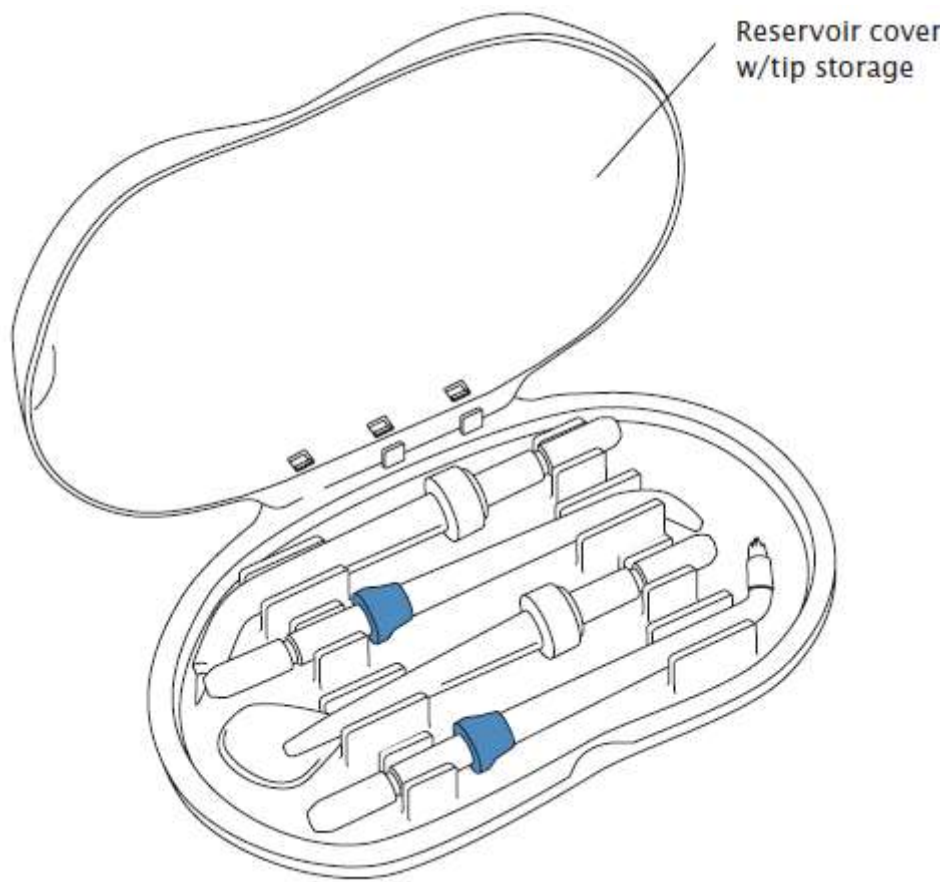

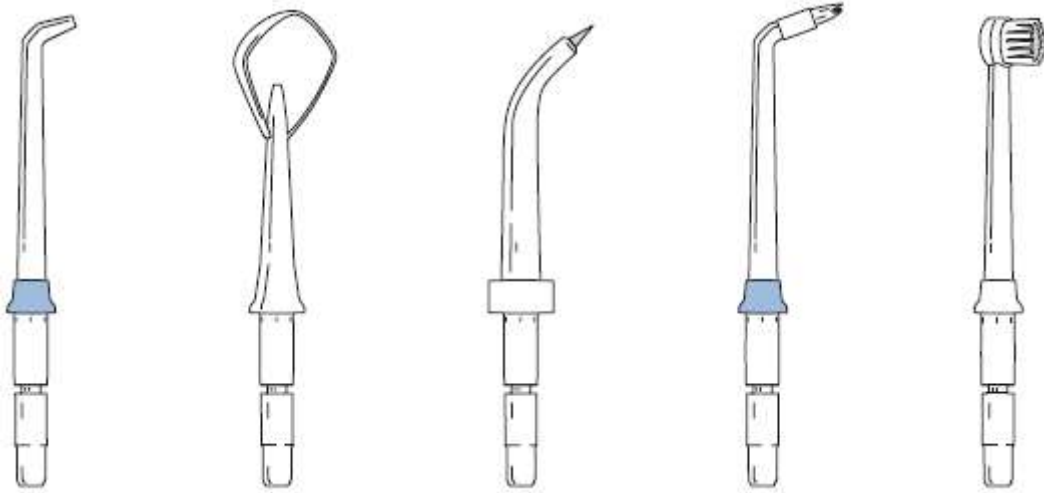

Standartinis antgalis; Liežuvio valiklis; Antgalis Pik Pocket® ; Ortodontinis antgalis; Dantų šepetėlio antgalis



## PASIRUOŠIMAS

Ijunkite laido kištuką į elektros lizdą. Jei el. lizdas yra valdomas sieniniu jungikliu, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas.



### Rezervuaro paruošimas

Atskirkite rezervuarą ir dangtį nuo pagrindo. Užpildykite rezervuarą drungnu vandeniu. Uždėkite rezervuarą virš pagrindo ir stipriai išspauskite.

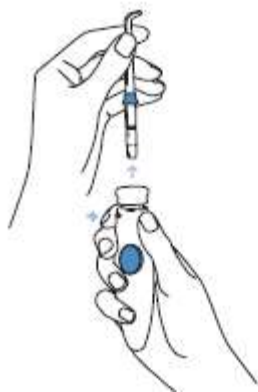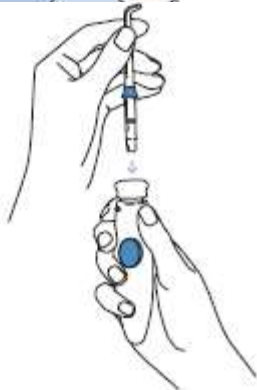


### Antgalių keitimas



Įstatykite antgalį į burnos irigatoriaus rankenos viršutinę dalį. Jei taisyklingai užfiksuosite antgalį, spalvotas žiedas gražiai susijungs su rankenos galu. Norėdami nuimti antgalį nuo rankenos, paspauskite antgalio nuėmimui skirtą mygtuką ir ištraukite antgalį.

## PASIRUOŠIMAS

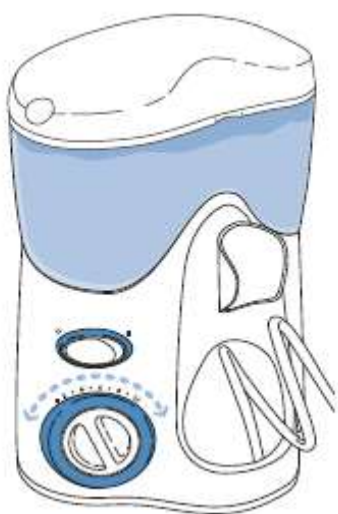

### Slėgio reguliavimas

Pirmą kartą naudojant prietaisą, iš pradžių pasukite slėgio reguliavimo rankenėlę į žemiausią padalą (slėgio padala Nr1.). Palaipsniui didinkite slėgį iki jums reikiamos padalos – ar iki tos padalos, kurią jums paskyrė jūsų odontologas.



### Padėtis burnoje

Pasilenkite žemai virš praustuvo ir įdėkite antgalį į burną. Nukreipkite antgalį dantų kryptimi.

Su laisva ranka įjunkite irigatorių. Nustatykite jums reikiamą slėgio padalą.




Nukreipkite srovę pasukdami rutulio formos rankenėlę, esančią rankenos viršūnėje.

## PASIRUOŠIMAS

### Rekomenduojama technika



Nukreipkite srovę 90 laipsnių kampu dantenų kryptimi. Truputį priverkite lūpas, kad išvengtumėte vandens purslų, bet leiskite vandeniui tekėti laisvai nuo burnos į praustuvą. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, pradėkite krūminių dantų srityje (ties galiniais dantimis) ir tęskite artėdami prie priekinių dantų. Leiskite irigatoriaus antgaliui slysti ties dantenų linija, trumpam pristabdykite ties tarpdančiais. Tęskite tol, kol visos sritys aplink dantis ir tarp jų bus švarios.

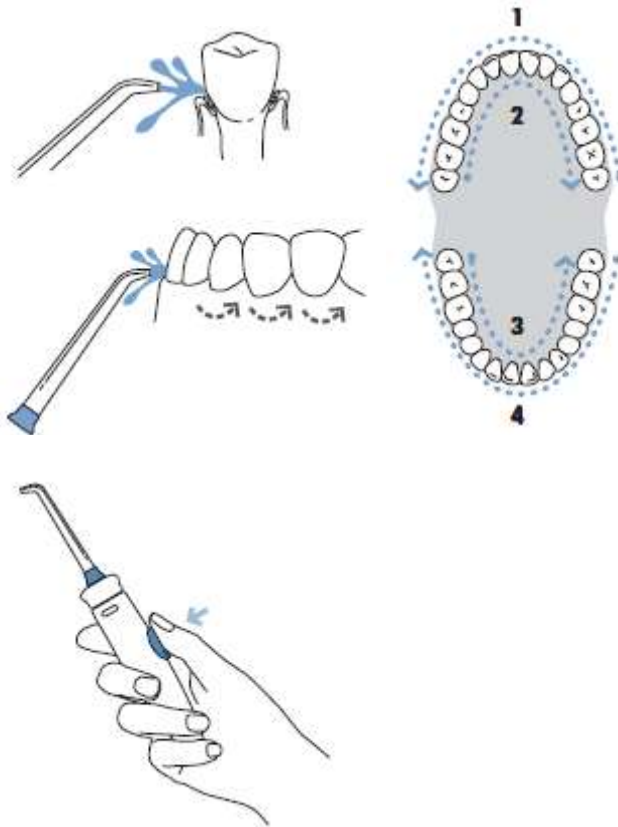

### Sustabdymo valdymas

Jūs galite laikinai sustabdyti srovę bet kuriuo metu paspaudę sustabdymo mygtuką, esantį ant rankenos.

### Pabaiga

Išjunkite prietaisą. Išpilkite visą likusį vandenį iš rezervuaro. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

## PASIRUOŠIMAS




### **Patarimai Pik Pocket® antgalis**

Pik Pocket® antgalis tiekia vandenį ar antibakterinius skysčius giliai į tarpdančius. Kad panaudotumėte Pik Pocket® antgalį, pasilenkite žemai virš praustuvo ir laikykite minkštą antgalį ties dantimi 45 laipsnių kampu ir švelniai padėkite antgalį po dantenomis, į tarpdančius. Įjunkite prietaisą į žemiausią slėgio lygį ir švelniai valykite ties dantenomis, įterpdami antgalį tarp dantų. Tęskite vesdami antgalį ties dantenu linija tol, kol ištuštės rezervuaras.



### **Liežuvio Valiklis**


Padėkite liežuvio valiklį ant liežuvio ir pradėkite dantų valymą – naudokite žemiausią slėgio lygį, padidinkite kaip jums patogiu. Švelniai padėkite liežuvio valiklį ties liežuvio viduriu ar jo vidurio linija apytiksliai per pusę liežuvio į galą ir lengvu slėgiu judėkite pirmyn.

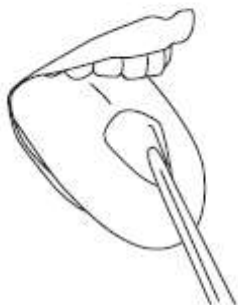

### **Dantų šepetėlio antgalis**

Įsidėkite dantų šepetėlio antgalį burnoje su šepetėlio galvute ant danties ties dantenu linija. Dantų šepetėlio antgalis gali būti naudojamas tiek su dantų pasta, tiek be jos. Įjunkite burnos irigatorių taip, kad vandens srovės tekėtų per antgalį. Naudodami silpną slėgį (šeriai neturi palinkti) sukite šepetėlį pirmyn ir atgal su labai trumpais smūgiais – panašiai kaip darytumėte su rankiniu dantų šepetėliu. Kartokite tą patį su gretimais dantimis. Vanduo tekės per šepetėlį, kad padėtų tuo pačiu ir valyti ir skalauti danties paviršių.

## PASIRUOŠIMAS

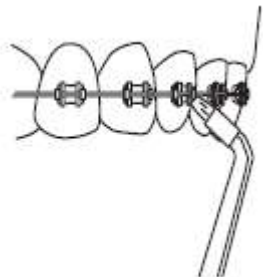

### Ortodontinis antgalis

Pradėkite ties paskutiniu krūminiu dantimi. Nukreipkite antgalį 90 laipsniu kampu į dantį palei danteną. Leiskite irigatoriaus antgaliui slysti ties dantenu linija, švelniam pavalymui trumpam pristabykite ties tarpdančiais ir aplink ortodontinius breketus. Tęskite tol, kol visi dantys bus švarūs.

### Skalavimo skysčio naudojimas ir kitos priemonės

Jūsų Waterpik® burnos irigatorius gali būti naudojamas kartu su skalavimo skysčiu ir kitom antibakterinėm priemonėm. Paprašykite, kad jūsų odontologas rekomenduotų tinkamiausią jums priemonę. Dėmesio: kai kurių antibakterinių priemonių naudojimas gali pakenkti jūsų Waterpik® burnos irigatoriumi. Jei jums kilo klausimų dėl tam tikrų priemonių naudojimo su jūsų burnos irigatoriumi, susisiekite su Water Pik, Inc klientų aptarnavimu. Po bet kokios antibakterinės priemonės panaudojimo rezervuare, skirkite šiek tiek laiko rezervuaro išskalavimui. Iki pusės užpildykite rezervuarą šiltu vandeniu. Nukreipkite irigatorių į savo praustuvą. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam tekėti kol rezervuaras ištuštės. Tai padės apsaugoti antgalį nuo užteršimų ir pažeidimų, todėl jūsų prietaisas tarnaus ilgiau.

Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, rekomenduojame keisti ortodontinius antgalius po 6 mėnesių naudojimo.

## BURNOS IRIGATORIAUS PRIEŽIŪRA

Prireikus, valykite prietaisą naudodami minkštą audeklą ir švelnų valiklį.

Prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Prieš irigatoriaus demonstravimą šaltensėse sąlygose, nuimkite rezervuarą ir išpilkite visą skystį.

## GEDIMŲ TAISYMO VADOVAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	TAISYMAS
<b>Standartiniai antgaliai Ir liežuvio valiklis</b> Pratekėjimas tarp antgalio ir žiedo formos rankenėlės rankenos viršuje.	Nepilnai įstatytas antgalis	Išimkite antgalį ir įdėkite iš naujo
<b>Pik Pocket® antgalis</b> Plyšys minkštajame antgalyje	Antgalis yra nusidėvėjęs	Pakeiskite jį nauju antgaliu
<b>Burnos irigatoriaus korpusas</b> Vandens pratekėjimas rankenoje	Žarnelės defektas	Tai gali sutaisyti prietaiso tiekėjai ar Water Pik, Inc.
Pratekėjimas rezervuare	Trūkstamas rezervuaro vožtuvas ar rezervuaro vožtuvas yra aukštyn kojomis.	Pakeiskite rezervuaro vožtuvą (skambinkite Water Pik, Inc. ar prietaiso tiekėjams). Apverskite vožtuvą teisinga puse.
Netinkamas slėgis	Neteisingai įstatytas rezervuaras	Perstatykite rezervuarą, stipriai jį išpauskite
Neįsijungia prietaisas	Neveikia variklis	Įsitikinkite, kad elektros lizdas yra veikiantis; patikrinkite kito prietaiso pagalbą (patikrinkite perkrovos mygtuką ir/ar sieninį jungiklį).